

zippie®

アイリス ジッピー IRIS

アイリス
ジッピー IRIS が新価格になりました！ ※2012年1月10日
多くの新開発オプションとともにお求めやすい価格で登場です！



基本価格は 240,000 円 - 値下げしました！

シートパンおよび角度調整式フットプレートが標準装備されます。



1. 成長対応拡張機能 (成長対応型部品交換)

成長対応拡張機能を搭載・・・ジッピー IRIS は使用者の成長に合わせての拡張が可能です。

- ジッピー IRIS には、成長に対応して車いすを拡張する機能が装備されています。身長と身体の幅に対応して車いすが拡張することで1台のジッピーを10年以上使用される方もたくさんいらっしゃいます。
- 成長対応型車いすは、経済的であり、エコでもあります。お子さんの身体にいつもぴったり合った車いすを使用することで変形をはじめとした二次障害を防止できることが最大のメリットです。
- 奥行きへの対応は (1) 背もたれの位置を後方に移動する (2) シートフレーム前部を伸ばす (3) 足台を下方に移動する、の3つの調整で可能になります。
- 幅への対応は、トゥルーフィットプログラムを利用したストラットチューブの交換で、1度のみ無料で提供されます。
※詳細は2. トゥルーフィットプログラムを参照してください。

2. トゥルーフィットプログラム


トゥルーフィットプログラムを適用・・・ジッピー IRIS はトゥルーフィットプログラムの対象車いすです。

- トゥルーフィットプログラムにより購入から5年の間に1回、無料で成長対応のためのパーツが提供されます。
- 車いすに標準で装備された成長対応拡張機能で足りない場合はこのプログラムをご利用いただけます。



トゥルーフィット・プログラムでは以下の部品が無料で交換されます。
(別途、作業工賃がかかる場合がございます。詳細は販売店までお問い合わせください)

- | | |
|--------------|----------------------|
| ○ ストラットチューブ | ○ レッグストラップ |
| ○ シートレールチューブ | ○ コントラクターフットレストレール |
| ○ ストローラーハンドル | ○ フットプレート / ティルトケーブル |
| ○ シートパン | ○ 延長チューブ |
| ○ バックポスト | ○ ハンガー |
| ○ ティルトケーブル | ○ 片手駆動システム (使用時) |

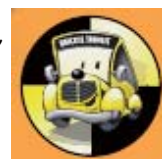

ACCESS
international

この資料に記載の会社名、製品名は、その会社の登録商標または商標です。また記載された仕様、デザイン、価格などは予告なく変更になることがあります。写真は印刷のため実際の製品の色、大きさと異なる場合があります。

3. 新型ジッピー IRIS の新しいオプション

- フレームがクイッキー IRIS と同様のデザインになりました。
- ティルト角度が 55 度と 40 度から選べるようになりました※
※ 55 度 (-5°~50°、0°~55°、5°~60°)、40 度 (-5°~35°、0°~40°、5°~45°)
※ リクライニングバックレストを選択する場合は、ティルト角度 40 度モデルのみ選択できます。
- 改良された角度調整式のストローラーハンドル※¹
- スイングアウトに加えてスイングインもするようになったフットレストハンガー※²



- 前座高 12.5" (31.8cm) ~ から選択できます※³

Improving People's Lives



- 車載用取り付け金具 (固定用フック) の位置が使いやすい位置になりました※⁴
- ティルトのためのレールにライン状の隆起部分が作られ、受け部分の溝とともに横揺れの防止をします※⁵
- 高さ調整アームレストのデザインが一新されました※⁶
- ハブ・ロックレバーのデザインが一新されました※⁷
- クリア・スポークガードのデザインが一新されました※⁸

